

Рхуsиотесhниса

ПРОИЗВОДСТВО ВОДОЛЕЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗРАБОТКА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ



ВАННА ДЛЯ СУХОГО ГИДРОМАССАЖА
«КВАТРОДЖЕТ»

ВАННА ДЛЯ СУХОГО ГИДРОМАССАЖА «КВАТРОДЖЕТ»



Компания «Физиотехника» – ведущий российский производитель водолечебного оборудования, рада представить вам свою новинку – ванну для сухого гидромассажа «Кватроджет». Новейшее российское высокотехнологичное оборудование с функцией перемещения 4-х форсунок.


4 ПОДВИЖНЫХ ФОРСУНКИ, ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ СОГЛАСНО
ОПРЕДЕЛЕННОГО АЛГОРИТМА, ПОВТОРЯЯ КОНТУРЫ ТЕЛА И СОЗДАВАЯ
МАССИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ С СИЛОЙ ОТ 2 ДО 6 АТМОСФЕР.

Ванна для сухого гидромассажа «КВАТРОДЖЕТ» (QUATROJET), предназначена для воздействия на мягкие ткани тела человека при помощи струй воды, но без непосредственного контакта с жидкостью, с целью оказания болеутоляющего действия, устранения хронических воспалительных процессов, улучшения кровоснабжения и трофики массируемых мягких тканей и внутренних органов благодаря рефлекторному механизму, облегчения выведения лишней жидкости из организма, создания расслабляющего и успокаивающего эффекта, активизации метаболизма.



Ванна предназначена для использования в медицинских и оздоровительных учреждениях широкого профиля (физиотерапевтические кабинеты клиник и поликлиник, а также оздоровительные и СПА центры, санатории, релаксационные центры).

Так же в нижней части экрана представлены шесть монорежимов, рисунок массажа которых неизменен и будет повторяться на всем протяжении времени процедуры.

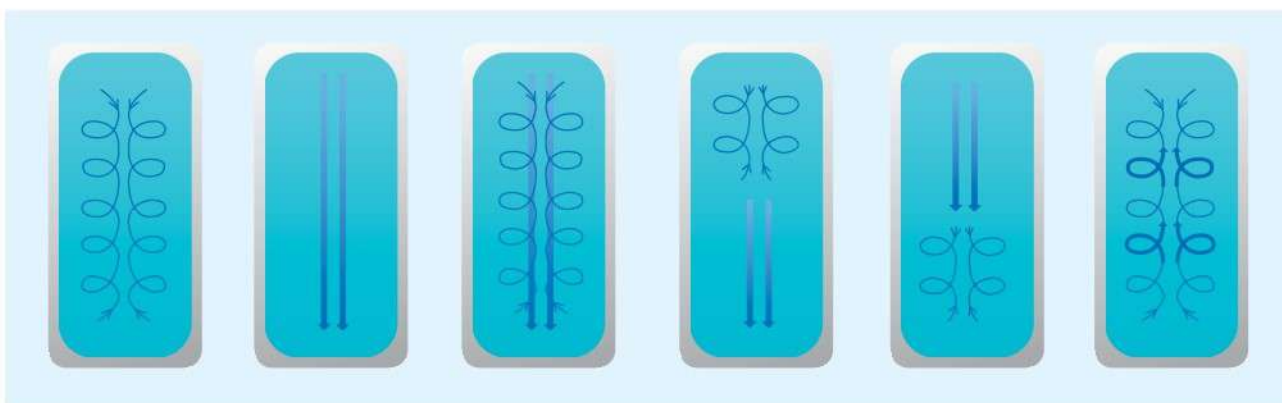

Стандартный цвет декоративного корпуса кушетки белый, однако возможно его исполнение в любом цвете по палитре RAL*. Также при индивидуальном заказе может быть нанесен аэрографический рисунок*.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Заболевание позвоночника и суставов, ожирение, заболевания кожи, нейроциркуляторная дистония, гипертоническая болезнь 1 ст., хронические обструктивные заболевания легких, заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата (артроз, остеоартроз, периартрит, гипертонус мышц) вне периода обострения, заболевания центральной и периферической нервной системы (неврозы, вертеброгенные болевые синдромы), нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу, для профилактики при сидячей работе пациентов, лицам, занимающимся тяжелым физическим трудом.

ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- » Происходит расслабление спазмированных мышц, благодаря этому уходит дискомфорт и болевые ощущения.
- » Улучшается кровоснабжение массируемых тканей (кожи, подкожной клетчатки, мышечного и суставного аппарата), соответственно улучшается их питание и снабжение кислородом.
- » Активизируются обменные процессы в организме, что благотворно сказывается на общем состоянии организма, значительно повышается расход калорий. Это особенно полезно в программах по снижению веса.
- » Восстанавливается венозный и лимфатический отток, что способствует устранению отёчности и выведению шлаков и токсинов из организма. Это свойство незаменимо при хронических воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также в программах очищения и детоксикации.
- » Происходит нормализация работы внутренних органов путём реализации рефлекторных механизмов при воздействии на паравертебральные зоны и биологически активные точки – идеальный вариант при комплексном лечении хронических заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем.
- » Снятие усталости и напряжённости, восстановление психоэмоционального равновесия способствуют улучшению настроения и общего самочувствия, повышению жизненного тонуса, быстрому восстановлению работоспособности.
- » Повышение тургора и эластичности кожных покровов, коррекция фигуры.

С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ВАННЫ «КВАТРОДЖЕТ»:

- ▶ Выбор программы массажа («Общий», «Лечебный», «Релакс», «Ноги», «Спина», «Шея и плечи»).
- ▶ Введение роста пользователя от 100 до 190 см.
- ▶ Установка времени процедуры длительностью от 5 до 30 мин с шагом установки 1 мин.
- ▶ Управление работой гидрофорсунок в процессе проведения процедуры (включение на работу либо всех четырех гидрофорсунок, либо двух неподвижных, либо двух вращающихся).
- ▶ Регулирование величины давления струи воды из гидрофорсунок (при работе двух любых гидрофорсунок – максимальное давление (6 ± 1) атм.; среднее давление (4 ± 1) атм. и минимальное давление (2 ± 1) атм.; при работе четырех гидрофорсунок – максимальное давление (3 ± 1) атм.; среднее давление ($1,5\pm 0,5$) атм.; минимальное давление ($0,5\pm 0,2$) атм..
- ▶ Нагревание воды в резервуаре кушетки в диапазоне от $+28^{\circ}\text{C}$ до $+36^{\circ}\text{C}$ с шагом установки температуры нагрева 1°C .
- ▶ Подсветка дна кушетки, что позволяет подсвечивать пол помещения.
- ▶ Выключение гидронасоса, вентилятора после окончания времени процедуры и установка форсунок в исходное положение.


Как проходит процедура? Пациент ложится на поверхность эластичной мембраны, которая под его весом немного погружается в воду, обеспечивая полную анатомичность и воссоздание формы тела. Таким образом, он оказывается в состоянии «невесомости». Теплые струи воды через мембрану мягко массируют тело, усиливая релаксационный эффект. Продолжительность процедуры зависит от физического состояния пациента. В среднем, оптимальное время воздействия – 15-20 минут и рекомендуемая частота сеансов – 1-2 раза в неделю.

Применение в санаторно-курортных и спа-центрах. Комплексное применение в СПА программах. Ванна Кватроджет даёт возможность значительно повысить эффективность таких видов процедур, как грязелечение (пелоидотерапия), талассотерапия, косметические обёртывания. Повышение результативности процедур достигается путём их сочетания с бесконтактным гидромассажем – одновременно человек получает и гидромассаж и обёртывание, что раньше было в принципе невозможно.




- ▶ **Хромотерапия** - воздействие цветом (6 различных цветов - зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, оранжевый).
- ▶ **Водяное ложе с подогревом** - максимальный комфорт.
- ▶ **Вибрационная терапия** для большего расслабления.
- ▶ **Простота управления** благодаря встроенным режимам управления на ЖК дисплее.


Основное меню управления ЖК монитора предлагает сразу выбрать один из 3 профилей предустановленных процедур, параметры которых можно будет изменить в процессе процедуры. После выбора одного из типов откроется меню выбора программы массажа.

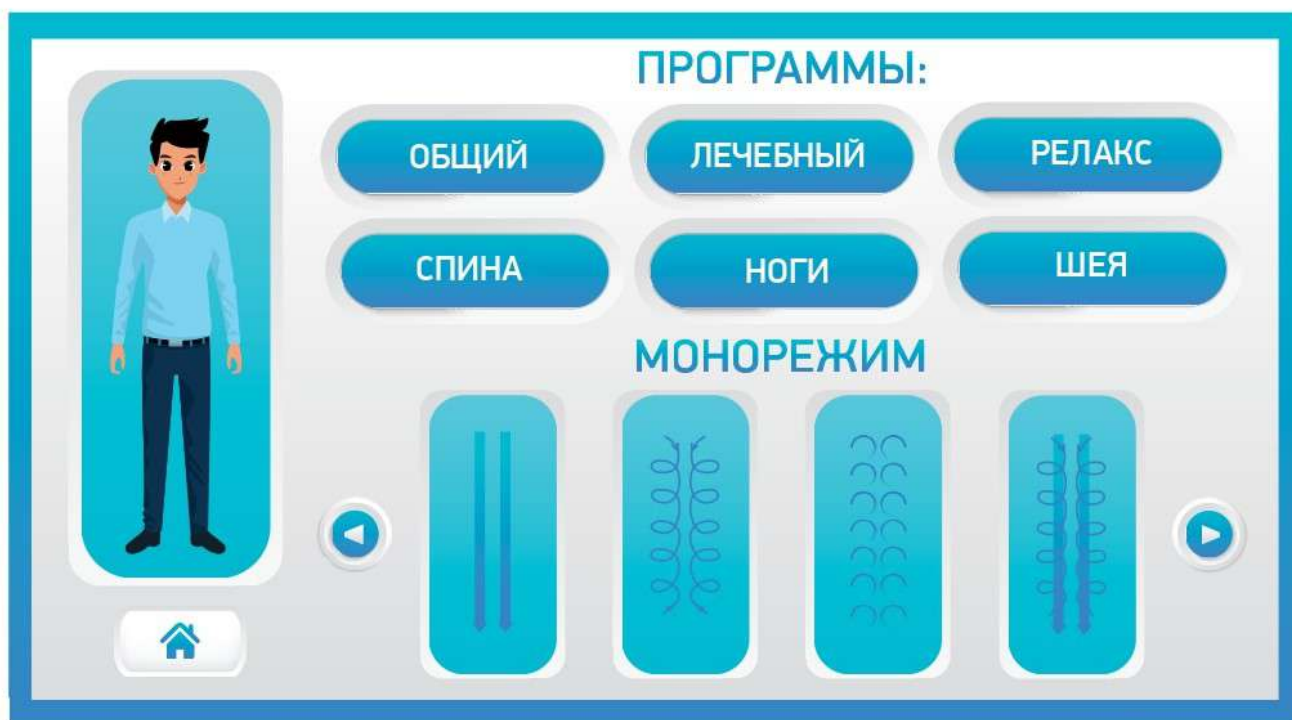

▶▶ **ОБЩИЙ** – состоит из следующей комбинации монорежимов. Позволяет провести универсальный массаж всего тела.

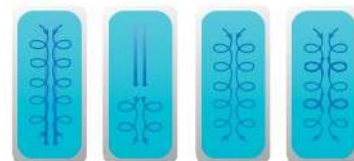


▶▶ **ЛЕЧЕБНЫЙ** – состоит из следующей комбинации монорежимов. Позволяет провести массаж по основным проблемным зонам.

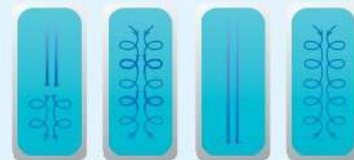

▶▶ **РЕЛАКС** – состоит из следующей комбинации монорежимов. Позволяет добиться максимального расслабления мышц пациента.



▶▶ **НОГИ** – состоит из следующей комбинации монорежимов. Позволяет провести массаж только зоны ног.

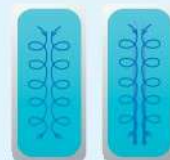

▶▶ **СПИНА** – состоит из следующей комбинации монорежимов. Позволяет провести массаж только зоны спины.



▶▶ **ШЕЯ И ПЛЕЧИ** – состоит из следующей комбинации монорежимов. Позволяет провести массаж только шейно-плечевой зоны.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (общие) ДхШхВ, мм	2600x1070x650
Габаритные размеры (ложа) ДхШхВ, мм	2240x740
Масса кушетки (без воды), кг	200
Величина давления струи воды из гидрофорсунок, атм.	0,5-6
Введение параметра роста пациента, см	100-190
Объем воды, заливаемой в резервуар кушетки, л	400±40
Время нагрева воды от температуры 10±1 С° до 34 С°, ч	не более 6
Потребляемая мощность, кВт	3,5
Номинальное напряжение при частоте 50 Гц, В	220±10%
Максимальная распределенная нагрузка на ложе до, кг	150
Рабочая температура воды, залитой в резервуар кушетки, °С	28-36
Количество программ гидромассажа	6
Количество монорежимов	6
Режимы работы	Программный/ручное программирование
Уровень звуковой мощности, дБА	55

220012, (Belarus), , , , 16, . 125

/ : +375 17 320 70 50, +375 17 320 99 43
/ : +375 29 695 70 50, +375 29 634 03 69

e-mail: darni-ls@bk.ru
e-mail: darnilux@bk.ru
e-mail: darnilux@mail.ru

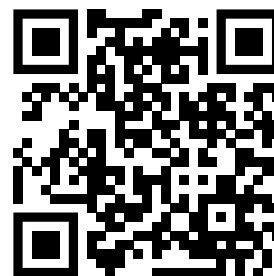

Информация каталога носит ознакомительный характер