

*Physiotecnica*

производство водолечебного оборудования

ВАННА СУХОГО ФЛОАТИНГА

«ПОСЕЙДОН» С ГИДРОМАССАЖЕМ



РАЗРАБОТАНО И  
ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ  
В РОССИИ

# Ванна сухого флоатинга ПОСЕЙДОН



Габаритные размеры (без монитора)	2610x1455x900 мм
Объем заливаемой воды	1350 литров
Потребляемая мощность	3 кВт



FLOAT (АНГЛ.) - ПЛАВАТЬ, ДЕРЖАТЬСЯ НА ВОДЕ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СУЩЕСТВУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ФЛОАТИНГА. ВСЕ ОНИ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ПОГРУЖЕНИИ В ВОДУ, НО ЕСТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ: ОНИ МОГУТ БЫТЬ КАК ВЛАЖНЫЕ, ТАК И СУХИЕ, С КОНТАКТОМ И БЕЗ КОНТАКТА С ВОДОЙ СООТВЕТСТВЕННО.

## Флоатинг особенно показан:



- ▶ при болях, лечении и профилактике заболеваний опорно-двигательной, нервной, сердечно-сосудистой и иммунной систем, при реабилитации после болезней и травм
- ▶ ДЦП (детский церебральный паралич)
- ▶ при необходимости быстрого восстановления сил и повышении адаптивных возможностей организма
- ▶ при работе и образе жизни, связанными с постоянным напряжением и стрессом, для общей релаксации организма
- ▶ при реабилитации после спортивных травм
- ▶ для омоложения организма, профилактики преждевременного старения
- ▶ для пробуждения креативности мозга (отзывы тех, кто пробовал флоатинг, говорят о том, что процедура напоминает «сон наяву» - человек находится на грани сна и бодрствования, что стимулирует работу мозга и способствует пробуждению творческих способностей).



Основным преимуществом системы сухого флоатинга перед контактными, где пациент ложится непосредственно в концентрированный водный раствор соли, является безопасность процедуры, возможность принять удобную позу, лежа на спине или боку, отсутствие противопоказаний, связанных с контактом с соляным раствором, возможность проведения сеанса в одежде.

Регулярное посещение процедур флоатинга рекомендовано беременным женщинам, которые страдают от повышенной нагрузки на позвоночник и стрессовых состояний.

Модель сухого флоатинга «Посейдон» разрабатывалась в первую очередь как медицинское оборудование, но также может поставаться в версии для частного использования. Оборудование по своим техническим характеристикам не имеет аналогов на Российском рынке!


Ванна Посейдон представляет собой емкость, наполненную водой и воздухом, с герметично прикрепленной к бортикам тончайшей и очень прочной водонепроницаемой мембраной







Флоатинг, позволяет человеку полностью расслабиться и избавиться от стресса без применения фармацевтических препаратов, восстановить силы после тяжелого рабочего дня, или спортивного соревнования. Оборудование позволяет создать незабываемое ощущение «невесомости на земле»

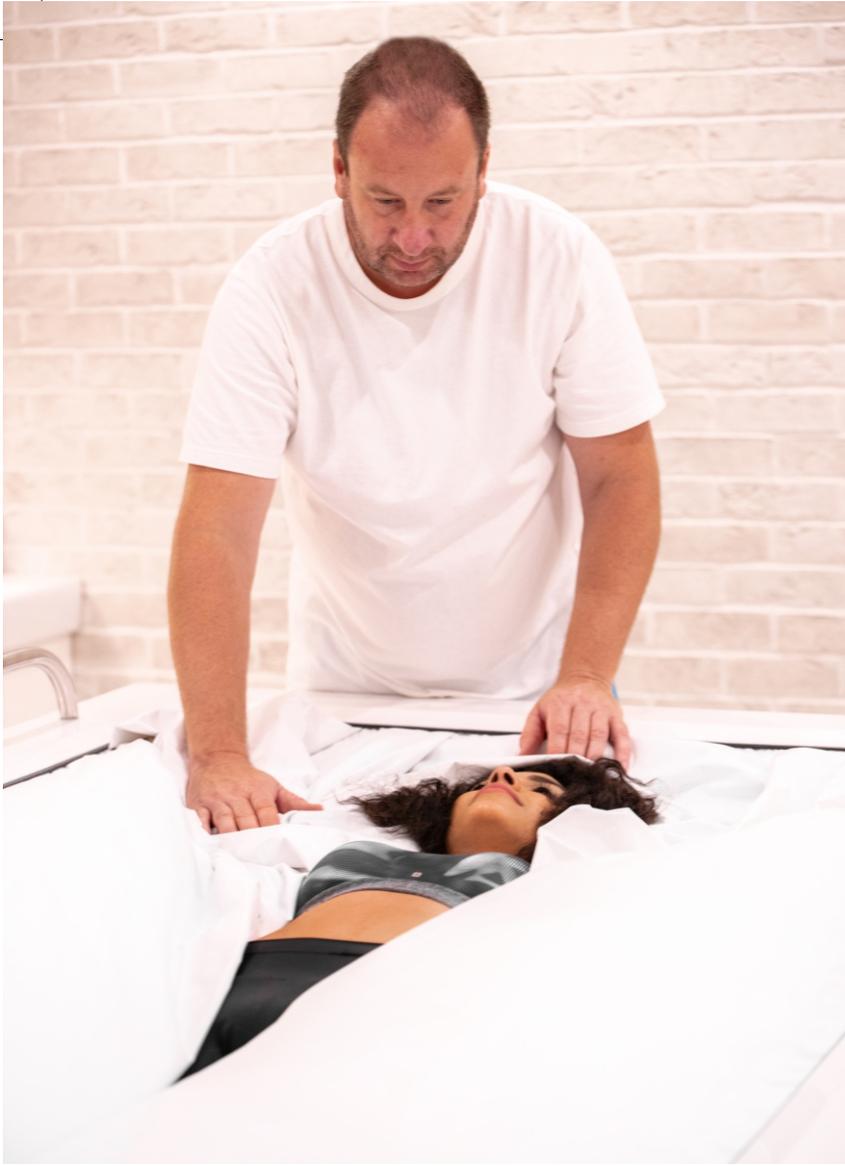



## Лечебное воздействие

В основе лечебного воздействия ванны сухого флоатинга «Посейдон» лежит методика сенсорной депривации - частичное или полное прекращение внешнего воздействия на один, или несколько органов чувств, что позволяет существенно снизить поток нервных импульсов в центральную нервную систему способствуя полному расслаблению тела. В отличие от аналогичных систем, где пациент непосредственно принимает процедуру в воде флоат система «Посейдон» обеспечивает большую безопасность и гигиеничность. У пациента отсутствует страх захлебнуться при этом имитируется полное ощущение, что он находится в воде.

## Внешний вид

Технически ванна Посейдон представляет собой емкость, наполненную водой и воздухом, с герметично прикрепленной к бортикам тонкой и очень прочной мембраной. Управление осуществляется с цветного ЖК дисплея. Уникальной особенностью флоат системы Посейдон является возможность проведение массажных процедур. Под ванной расположены насосы производительностью до 50000 литров час, создающие дополнительный релаксационный эффект за счет восходящего потока воды и воздуха.

## Методика проведения процедуры

Для проведения процедуры пациент укладывается на предварительно расправленную ткань. Врач задает общее время процедуры. Параметр гидромассажа задается в интервале от 1 до 30 минут по истечении которого он автоматически отключается. Возможен отпуск процедуры без гидромассажа.

Для удобства персонала заданные параметры сохраняются в память устройства. После запуска программы ложе плавно опускается. После того, когда время процедуры истечет, ложе подымается автоматически.

Также ванна флоатинга оснащена виброакустикой. Это система вибрационной передачи звука через воду, посредством устанавливаемых 4х вибродинамиков по периметру ванны. Виброакустическая терапия - это контактное и локальное воздействие микровибрациями звуковой частоты на ткани организма человека. При помощи физического воздействия на организм улучшается нарушенная микроциркуляция крови и лимфы в тканях и органах.

## Расслабление в невесомости

Флоат система Посейдон создает для человека условия при которых он может максимально расслабиться, избавиться от стресса без применения фармацевтических препаратов, восстановить силы после тяжелого рабочего дня, или спортивного соревнования. Оборудование позволяет создать незабываемое ощущение «невесомости на земле».

## Применение в медицинской практике:

успешно применяется в санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях, SPA – салонах и оздоровительных комплексах, центрах эстетической медицины и косметологии, в кабинетах психоэмоциональной разгрузки и релаксации, в центрах реабилитации инвалидов, в спортивной медицине для релаксации после интенсивных нагрузок.

## Эффекты применения:

- ▶ происходит расслабление спазмированных мышц и костей, благодаря этому уходит дискомфорт и болевые ощущения;
- ▶ восстанавливается венозный и лимфатический отток, что способствует устранению отёчности и выведению шлаков и токсинов из организма. Это свойство незаменимо при хронических воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также в программах очищения и детоксикации;
- ▶ улучшается кровоснабжение массируемых тканей (кожи, подкожной клетчатки, мышечного и суставного аппарата), соответственно улучшается их питание и снабжение кислородом;
- ▶ активизируются обменные процессы в организме, что благотворно сказывается на общем состоянии организма, значительно повышается расход калорий. Это особенно полезно в программах по снижению веса;
- ▶ происходит нормализация работы внутренних органов путём реализации рефлекторных механизмов при воздействии на паравертебральные зоны и биологически активные точки – идеальный вариант при комплексном лечении хронических заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем;
- ▶ снятие усталости и напряжённости, восстановление психоэмоционального равновесия способствуют улучшению настроения и общего самочувствия, повышению жизненного тонуса, быстрому восстановлению работоспособности.

## Посейдон

Ванна сухого флоатинга  
"Посейдон"  
с гидромассажем

Ванна сухого флоатинга  
«Посейдон» с гидромассажем,  
типоразмер мини

Посейдон		
Габаритные размеры (без монитора) ДхШхВ, мм	2610x1455x900	1920x1150x900
Габаритные размеры (ложа) ДхШ, мм	1950x960	1460x700
Масса ванны (без воды), кг	не более 300	не более 200
Общий объем заливаемой воды, л	1350±50	760±30
Рабочая температура воды, залитой в резервуар ванны, С	30-35	30-35
Время нагрева воды от комнатной температуры (18 С°) до 32 С°, ч	8-10	4-5
Глубина погружения пациента, мм	450±50	450±50
Полное время спуска-подъема ложа, сек.	90±10	90±10
Количество гидрофорсунок	8	8
Количество вибродинамиков	4	4
Уровень шума при включенном гидромассаже, дБА	55	45
Максимальная распределенная нагрузка на ложе до, кг	180	180
Номинальное напряжение сети при частоте 50 Гц, В	220±22	220±22
Потребляемая мощность, кВт	3	3
ЖК сенсорный экран	+	+
Установка обеззараживания воды ультрафиолетом с автоматическим таймером включения-выключения	+	+
Принадлежность		
Двухступенчатая противоскользящая ступень	+	+

220012, (Belarus), . . . . ., 16, . 125

/ : +375 17 320 70 50, +375 17 320 99 43  
/ : +375 29 695 70 50, +375 29 634 03 69

e-mail: darni-ls@bk.ru  
e-mail: darnilux@bk.ru  
e-mail: darnilux@mail.ru



Информация каталога носит ознакомительный характер